

Серия - ALE



Высокофункциональные лабораторные весы премиум-класса

Флагманская модель ViBRA



Лабораторные исследования



Пищевые производства



Химия и нефтехимия



Фармацевтика и биотехнологии

Серия ALE - новое слово в оптимизации процессов лабораторного взвешивания.

Функции:

- Счетный режим
- Процентное взвешивание
- Функция сравнения
- Статистическая функция
- Суммирование
- Функция взвешивания нестабильных грузов
- Возможность взвешивания под весами
- Возможность настройки уровня доступа пользователей
- Режим умножения на коэффициент
- Режим вычисления по формуле

Гарантия 7 лет


Модель	ALE 223	ALE 323	ALE 623	ALE 1203	ALE 1502	ALE 2202	ALE 3202	ALE 6202	ALE 8201	ALE 15001
Мах, г	220	320	620	1200	1500	2200	3200	6200	8200	15000
Дискретность, г	0,001	0,001	0,001	0,001	0.01	0.01	0.01	0.01	0.1	0.1
Класс точности	Высокий (II)			Специальный (I)	Высокий (II)					
Дисплей	Жидкокристаллический с подсветкой									
Размер платформы, мм	Ø118				160x180					
Калибровка	Внешняя									
Интерфейс	RS232C, USB									
Габариты, мм	270x205x301, включая ветрозащиту				260x192x85					
Вес, кг	2,6				2,7					

Новинка 2017

Преимущество технологии
Tuning-Fork

Использование датчика Tuning-Fork в весах ViBRA серии ALE дает пользователю уникальные преимущества:


- Быстрое начало работы – вход в рабочий режим в течение 1 минуты;
- Высокая точность и воспроизводимость результатов;
- Экстремально низкая зависимость от температуры окружающей среды;
- Устойчивость к перегрузу (в 15 раз).

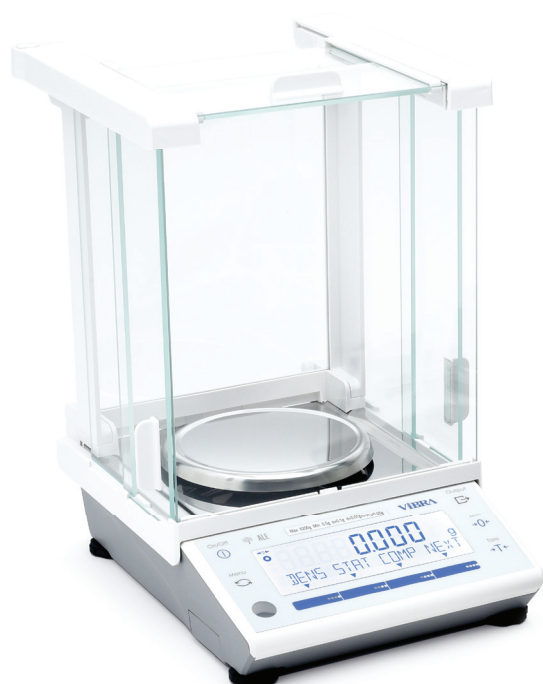

Гарантия 7 лет


Модель	ALE 223R	ALE 323R	ALE 623R	ALE 1203R	ALE 1502R	ALE 2202R	ALE 3202R	ALE 6202R	ALE 8201R	ALE 15001R
Max, г	220	320	620	1200	1500	2200	3200	6200	8200	15000
Дискретность, г	0,001	0,001	0,001	0,001	0.01	0.01	0.01	0.01	0.1	0.1
Класс точности	Высокий (II)			Специальный (I)	Высокий (II)					
Дисплей	Жидкокристаллический с подсветкой									
Размер платформы, мм	Ø118				160x180					
Калибровка	Внутренняя									
Интерфейс	RS232C, USB									
Габариты, мм	270x205x301, включая ветрозащиту				260x192x85					
Вес, кг	2,9				3,3					

Серия - ALE

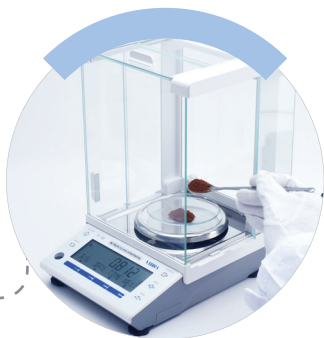

Самое короткое время отклика 1,6 сек.

Короткое время отклика незаменимо для эффективного взвешивания. В весах ViBRA серии ALE значительно уменьшено время стабилизации (отклика) с применением новой технологии.

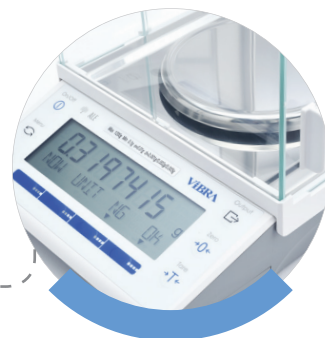

Автоматическая встроенная калибровка

Расширенный модельный ряд для весов со встроенной калибровкой с Max до 15 кг.



Автономная работа для весов в базовой комплектации

Благодаря низкому энергопотреблению весы ViBRA серии ALE могут работать от "сухих" батарей. Это позволяет использовать весы в местах без возможности подключения к точке электропитания.



Уникальная модель ALE1203

Впервые на датчике Tuning-Fork с Max=1200 г и d=0,001 г



Дружественный по отношению к пользователю интерфейс (user-friendly)

Весы ViBRA серии ALE легко управляются. Дружественный дисплей помогает пользователю текстовым сообщением.




Функция свободной кнопки

В весах ViBRA серии ALE на передней панели есть 4 "свободные" кнопки, которые легко программируются на быстрый вызов часто используемых функций. Минимизируйте время при проведении стандартных процедур с весами.



Самые компактные в сегменте лабораторных весов

Компактный корпус весов серии ALE позволяет использовать весы в самых небольших лабораториях. Кроме того, весы легко помещаются в любом ламинарном или перчаточном боксе.

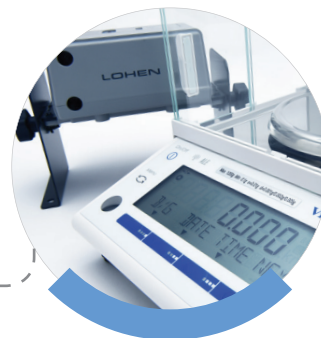


Многообразие интерфейсов

В стандартной комплектации весов ViBRA серии ALE для соединения с внешними устройствами присутствует RS232C и USB. Второй RS232C, Ethernet и релейный выход доступны в виде дополнительных опций.



Четкий, яркий и большой LCD дисплей

На четком, ярком и большом LCD дисплее пользователь может без ошибок прочесть показания даже в тяжелых производственных условиях.

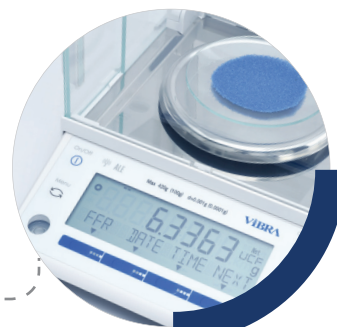


Взвешивание нестабильных грузов при минимальном времени отклика

Стабильность и скорость получения результата должны быть корректными в зависимости от характера измеряемого объекта. Весы ViBRA серии ALE позволяют взвешивать животных в лабораторных условиях.



Возможность индивидуальных настроек пользователей

Весы ViBRA серии ALE позволяют, путем ввода настроек ID-пользователей, решать разные производственные задачи нескольких операторов.

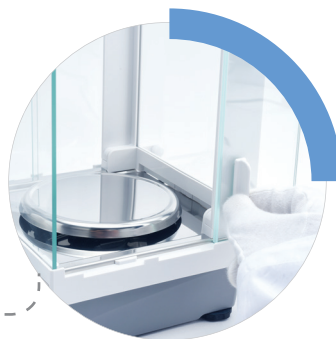

Измерение плотности

Все весы серии ALE в базовой комплектации оснащены поддонным крюком для взвешивания под весами и определения плотности образцов.