

Серия - AJ



Стандартные лабораторные весы

Превосходство в простоте



Медицина



Производство ювелирных изделий



Пищевые производства



Наука и образование



Простота конструкции, при этом полный спектр измерительных функций для различных областей применения (лабораторные исследования, ювелирное дело, производство и т.д.). Весы ViBRA серии AJ всегда найдут простое и верное решение на любые Ваши запросы.

Функции:

- Счетный режим
- Процентное взвешивание
- Суммирование
- Режим дозирования
- Режим сравнения

Гарантия 7 лет

Модель	AJ-220CE AJH-220CE	AJ-320CE AJH-320CE	AJ-420CE AJH-420CE	AJ-620CE AJH-620CE	AJ-820CE	AJ-1200CE	AJ-2200CE AJH-2200CE	AJ-3200CE AJH-3200CE	AJ-4200CE AJH-4200CE	AJ-6200CE	AJ-8200CE	AJ-12KCE
Max, г	220	320	420	620	820	1200	2200	3200	4200	6200	8200	12000
Min, г	0,02			0,1	1	0,5			1	5		
Дискретность, г	0.001				0.01		0.01					0.1
Класс точности	Высокий (II)			Спец. (I)		Высокий (II)			Спец. (I)	Высокий (II)		
Дисплей	Жидкокристаллический с подсветкой											
Размер платформы, мм	Ø 118				170x140			180x160				
Калибровка	Внешняя/(H) - Внутренняя											
Интерфейс	RS232C											
Габариты, мм	235×182×170 (с ветрозащитой)				235x182x75			265x192x87				



Преимущества технологии Tuning-Fork

Использование датчика Tuning-Fork в весах ViBRA серии AJ дает пользователю уникальные преимущества:

- Быстрое начало работы – вход в рабочий режим в течение 1 минуты;
- Высокая точность и воспроизводимость результатов;
- Экстремально низкая зависимость от температуры окружающей среды;
- Устойчивость к перегрузу (в 15 раз).



Внутренняя калибровка

Для весов с Max до 4200 г. Калибровка весов является неотъемлемой частью получения корректных результатов измерений. Внутренняя калибровка весов серии AJ позволяет без отрыва от текущей работы провести калибровку весов.



Яркий LCD дисплей с подсветкой

На четком, ярком и большом LCD дисплее пользователь может без ошибок прочесть показания даже в тяжелых производственных условиях.




Измерение плотности (дополнительная опция)

Комплект измерения плотности может быть установлен на модели ViBRA серии AJ с Max до 620 г. Все модели ViBRA серии AJ могут быть оснащены поддонным крюком. Измерение плотности с весами серии AJ стало стандартной процедурой в ежедневной работе.



Легкосъемная ветрозащита в стандартной комплектации

В стандартную комплектацию весов с Max 220-620 г. входит съемная ветрозащита. Упрощает измерение самых различных образцов, путем монтажа/демонтажа ветрозащиты.

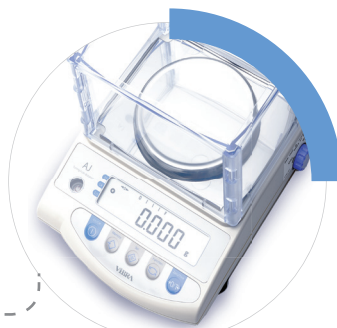

Возможность работы от встроенного аккумулятора

Опционально все весы серии AJ имеют возможность непрерывной работы от встроенного аккумулятора. Это позволяет использовать весы в мобильных лабораториях и при выездной работе.